
LAMINILLAS DE LONG

Láminas separadoras de oclusión

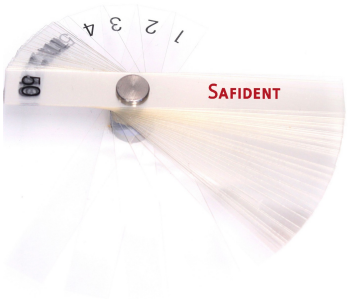

50 láminas numeradas de 0,1 mm de grosor cada una, unidas con un remache de acero inoxidable.

APLICACIONES

1. Registro de la mordida en relación céntrica para localizar interferencias oclusales y para remontar trabajos protésicos

En la placa de cera de registro se hace un recorte de unos 1,5 cm en la zona incisal central, para poder colocar las láminas separadoras durante el registro de la mordida (fig. 1). Se deben introducir unas 50 láminas, lo que equivale a una elevación de unos 5 mm en el vástago incisal del articulador. En casos poco frecuentes, de clase II o con interferencias oclusales grandes, se deben introducir más láminas.

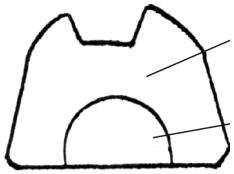


Fig. 1 Placa de cera con un recorte para introducir las láminas y refuerzo de estaño precortado (SAFIDENT).

2. Procedimientos de tallado selectivo

Las láminas introducidas mantienen separados los dientes posteriores, de modo que el paciente puede cerrar en una posición reproducible.

- Empezar con el número de láminas necesario para evitar cualquier contacto entre los dientes posteriores, más dos. Las láminas las sujeta el asistente o el paciente. El bloque se debe colocar siempre en la misma posición, entre los dos incisivos centrales, y no demasiado adentro de la boca.
- El paciente muerde con firmeza sobre los dientes posteriores (molares y premolares) mientras se retiran lateralmente las tiras de marcado oclusal (p. ej., Hi-Mark o Bausch), sujetas con un portapapel de articular.
- Cuando el paciente abre la boca, se introduce el aspirador de saliva para evitar que trague y que se produzcan nuevos contactos oclusales incorrectos. Si no se ven marcas, o una vez tallados los contactos marcados, se reduce el número de láminas.
- El procedimiento se repite hasta que el número de láminas introducidas es mínimo y los contactos oclusales son iguales en ambos lados. Después de eliminar las interferencias céntricas, se deben comprobar las interferencias anteriores y laterales, y verificar los resultados más adelante.
- Precaución: a veces el bloque se puede soltar de golpe del contacto incisal sin hacer fuerza. En este caso, volver a aumentar el número de láminas y adaptarlas a la nueva posición (hacia arriba y hacia delante).

En las aplicaciones 1 y 2, el paciente debe estar en posición reclinada (posición de Trendelenburg).

3. Estimación del espacio en el laboratorio dental y en la boca del paciente

Las láminas introducidas entre el maxilar superior y el inferior, o entre los modelos de trabajo correspondientes, dan una indicación del espacio disponible para el trabajo protésico.

4. Confección de provisionales directos de plástico con impresiones de doble arcada Simultray

5. Toma de impresiones de doble arcada que se deben duplicar

Precaución: las aplicaciones 3 y 4 no se deben realizar con el paciente inclinado hacia atrás.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

USO PREVISTO	Láminas separadoras de oclusión que se utilizan como espaciador en el registro oclusal, en el tallado selectivo y en las impresiones de doble arcada.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	Introducir las láminas solo entre los incisivos y mantenerlas siempre bajo control, para que no se puedan tragar ni aspirar. No utilizar láminas dobladas, agrietadas o deformadas.
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Reutilizable. **No autoclavar ni esterilizar con calor:** las láminas de acetato se deforman con el calor. Después de cada uso, limpiar las láminas con agua y jabón, aclararlas y secarlas. Sustituir el juego cuando las láminas estén desgastadas, dobladas o deformadas.
MATERIAL	Láminas: acetato de 0,1 mm de grosor, unidas con un remache de acero inoxidable.
FABRICANTE	SWISS-DS-SAFIDENT, S.L.U. · C/ Ponent 10 · 43700 El Vendrell (Tarragona) · España · info@safident.eu · www.safident.eu
	Producto sanitario de clase I. Solo para uso dental profesional. CE

SWISS-DS-SAFIDENT, S.L.U. Reg. Merc. Tgna. T. 2695 de Societats, Fol 66, Full Núm. T44312, Ins. 1a